



Mode d'emploi du stimulateur

1

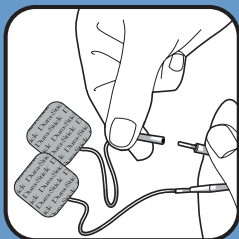

Connectez les électrodes aux câbles.

2

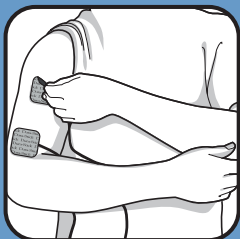

Posez les électrodes sur la peau.

3



Insérez le ou les câbles dans les connecteurs de sortie situés en bas du dispositif.

4



Appuyez sur le bouton « ON/OFF ».

5



Appuyez sur le bouton PROGRAMME « P » du canal désiré.

6



Faites varier les numéros de programme avec les flèches haut/bas du canal concerné.

7




Confirmez en appuyant sur la touche OK.

8



Démarrez la stimulation en appuyant sur la flèche Augmentation jusqu'à l'obtention du niveau de stimulation souhaité.

9

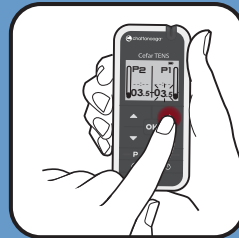

Reproduire la même procédure avec le 2^{ème} canal si désiré.